

RECOVERY+PLUS

GO TO THE NEXT LEVEL



PRESSOTERAPIA

RP 4.0 G2

MANUALE D'USO

MISURE DI SICUREZZA

Si prega di leggere attentamente le seguenti precauzioni per garantire la vostra sicurezza e il corretto utilizzo del prodotto.

Avvertenze

- 1 · Se si verifica un dolore intenso, un sintomo insolito o si desidera interrompere l'uso del prodotto in caso di emergenza:
 - Premere il pulsante di accensione per fermare il dispositivo o scollegarlo.
 - Rimuovere gli stivali e consultare un medico.
- 2 · Consultare il medico prima di utilizzare questo prodotto o scollegare i tubi in caso di:
 - Infiammazione, infezione o dolore di origine sconosciuta nella zona di applicazione o nelle vicinanze.
 - Fratture ossee o lussazioni nella zona di applicazione o nelle vicinanze.
 - Trattamenti medici in corso o controindicazioni che richiedano il controllo con dispositivi medici.
 - Uso di pacemaker o altri dispositivi medici sensibili alle interferenze elettriche.
 - Tumori maligni.
 - Patologie cardiache.
 - Grave neuropatia periferica o disturbi sensoriali dovuti al diabete.
 - Inidoneità all'uso del prodotto in caso di traumi fisici.
- 3 · Tenere questo prodotto fuori dalla portata dei bambini e di persone non in grado di utilizzarlo in modo autonomo..

- 4 · Utilizzare solo l'adattatore di corrente originale.
- 5 · Non graffiare, danneggiare, manipolare, piegare eccessivamente, tirare o piegare il cavo di alimentazione o l'adattatore. In caso contrario, si potrebbero causare incendi o scosse elettriche.
- 6 · Non utilizzare il prodotto se l'adattatore non funziona o la spina è allentata.
- 7 · Non inserire o scollegare l'adattatore con le mani bagnate.
- 8 · Non collocare il telecomando su coperte o utilizzare il dispositivo in ambienti ad alta temperatura.
- 9 · È vietato modificare, smontare o riparare il prodotto senza autorizzazione.



Precauzioni

- 1 · Utilizzare solo il caricabatterie fornito con il prodotto. L'uso di un caricatore diverso può compromettere il funzionamento del sistema.
- 2 · Non utilizzare in bagno o in ambienti umidi.
- 3 · Tenere fuori dalla portata dei bambini.

- 4 · Scollegare l'adattatore di corrente quando non si utilizza il prodotto.
- 5 · Non camminare mentre si sta utilizzando questo dispositivo.
- 6 · Non lasciare il sistema, l'alimentazione o altri accessori in luoghi dove possano essere danneggiati da bambini, animali domestici, insetti o liquidi.
- 7 · I prodotti forniti sono progettati per essere utilizzati da una sola persona alla volta.

DOMANDE FREQUENTI


D1: Come funziona il massaggio di questo prodotto?

R1: Si tratta di un dispositivo a compressione d'aria con quattro camere (piede, parte inferiore e superiore del polpaccio e coscia), che si gonfiano e sgonfiano automaticamente con una sofisticata frequenza che simula un massaggio manuale. In questo modo si massimizza il flusso sanguigno in tutto il corpo, contribuendo a ridurre il dolore muscolare nelle aree trattate e migliorare la circolazione.

D2: Quanti tipi di massaggio ci sono? Qual è la differenza?

R2: Questo prodotto dispone di quattro modalità di massaggio:

Modalità A: RELAX

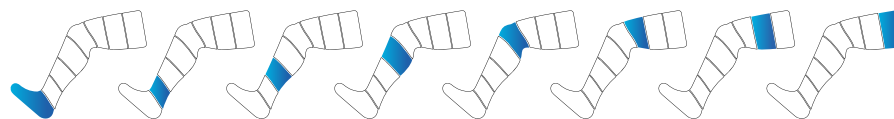

Modalità B: SEQUENZIALE



Modalità C: INTENSO



Modalità D: IMPULSO (P = Pulsazione)



D3: Cosa devo fare se la pressione del massaggio è troppo debole o troppo forte?

R3: Sono disponibili tre livelli di intensità. Si consiglia di selezionare l'intensità più adatta alle proprie esigenze. Se anche al livello più basso la pressione risulta eccessiva, interrompere l'uso del dispositivo e consultare un medico prima di utilizzarlo nuovamente.

D4: Per quanto tempo è consigliato usare questo prodotto?

R4: È consigliabile utilizzarlo una o due volte al giorno per un massimo di 30 minuti a sessione. Tuttavia, può essere utilizzato anche più a lungo se ci si sente particolarmente affaticati e si desidera un massaggio più prolungato.

GO TO THE
NEXT
LEVEL

D5: Posso usarlo solo su una gamba?

R5: Entrambi gli stivali devono essere collegati affinché il sistema funzioni correttamente. Tuttavia, è possibile indossare solo uno stivale e lasciare l'altro non indossato ma collegato, poiché continuerà a funzionare normalmente. Si consiglia di utilizzare entrambi per risultati ottimali.

D6: Perché l'unità di controllo fa rumore?

R6: Il suono proviene dalla pompa dell'aria in funzione, che fornisce aria continuamente alle camere degli stivali. È un comportamento del tutto normale.

D7: Cosa posso fare se ho le gambe più grandi del normale?

R7: Il prodotto è stato progettato per adattarsi alla maggior parte delle persone.

Se gli stivali risultano troppo stretti, è possibile acquistare delle estensioni nel nostro negozio, oppure contattare il nostro servizio post-vendita all'indirizzo info@recovery-plus.es per ricevere il link diretto.

D8: Quando è consigliato usare questo prodotto?

R8: Questo prodotto stimola il flusso sanguigno per alleviare efficacemente dolore muscolare e affaticamento. Può essere usato in qualsiasi momento: prima dell'esercizio fisico per riscaldare i muscoli, dopo l'attività per migliorare il recupero o semplicemente dopo una lunga giornata di lavoro.

Nome del prodotto	Sistema di recupero con compressione ad aria
Modello	RP 4.0 G2
Adattatore	AC100-240V, 50/60Hz, DC 12V 2A
Potenza nominale	24W
Modalità di compressione	4 modalità – Relax / Sequenziale / Intenso / Impulso
Livelli di intensità Gamma di pressione:	11 livelli: Bassa-50/60/70/80mmHg; media-90/100/110/120mmHg; alta-130/140/150mmHg
Timer	15 - 45 minuti (intervalli di 5 minuti)
Peso del prodotto	3kg.
Dimensioni	419X190X230mm.
Tipo di stivale:	4 camere
Condizioni di utilizzo	Temperatura: -20°C fino a 40°C Umidità: 30% – 85% (senza condensa) Presión atmosférica: 75Pa a 106Pa.
Condizioni di stoccaggio	Temperatura: -20°C a 40°C. Humedad: 30% a 85% sin condensación. Pressione atmosferica: 75Pa – 106Pa Tenere in un luogo asciutto e lontano dalla luce solare diretta

Problem1	Possibili cause	Soluzioni
1· Il prodotto non funziona o lo schermo non si accende	1. Non è acceso. 2. L'adattatore non è collegato correttamente. 3. La presa a muro è difettosa.	1. Premere il pulsante di accensione. 2. Verificare che l'adattatore sia collegato correttamente alla centralina e alla presa. 3. Controllare un'altra presa a muro.
2· Lo schermo è acceso ma gli stivali non si gonfiano	1. Solo uno stivale è collegato al tubo dell'aria. 2. I tubi dell'aria non sono inseriti correttamente. 3. Gli stivali sono danneggiati.	1. Il sistema funziona solo se entrambi gli stivali sono collegati. 2. Verificare che i tubi siano inseriti completamente nella centralina e nella scatola di distribuzione (attenzione al segno "UP"). 3. Verificare eventuali perdite d'aria negli stivali. In caso affermativo, contattare info@recovery-plus.es

3. Il dispositivo si interrompe durante l'uso o non pompa aria	1. I tubi dell'aria non sono collegati correttamente. 2. L'adattatore è scollegato. 3. Il tempo della sessione è terminato.	1. Verificare i collegamenti dei tubi come sopra. 2. Controllare il collegamento dell'adattatore. 3. Il dispositivo si spegne automaticamente al termine della sessione. Premere il pulsante di accensione per avviare una nuova sessione.
---	--	---


DESCRIZIONE DEL PRODOTTO



ISTRUZIONI PER L'USO

Si prega di leggere attentamente le misure di sicurezza prima di utilizzare il prodotto. Per ottenere un massaggio ottimale, seguire queste istruzioni:


1·Inserire i tubi dell'aria degli stivali nel condotto.
È necessario collegare entrambi gli stivali affinché il sistema funzioni.

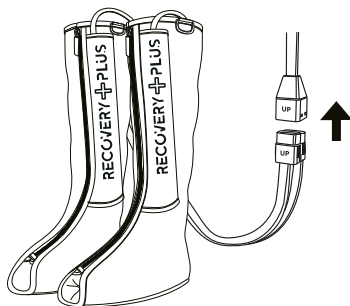


2· Collegare il condotto alla centralina di controllo. Sentirete un “clic” udibile.



3· Collegare correttamente l'adattatore alla presa e alla centralina.
Sentirete un segnale acustico “Di” e lo schermo lampeggerà per un secondo

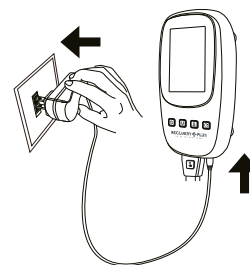

4· Indossare correttamente gli stivali, facendo attenzione al segno “Left/Right” (Sinistra/Destra).

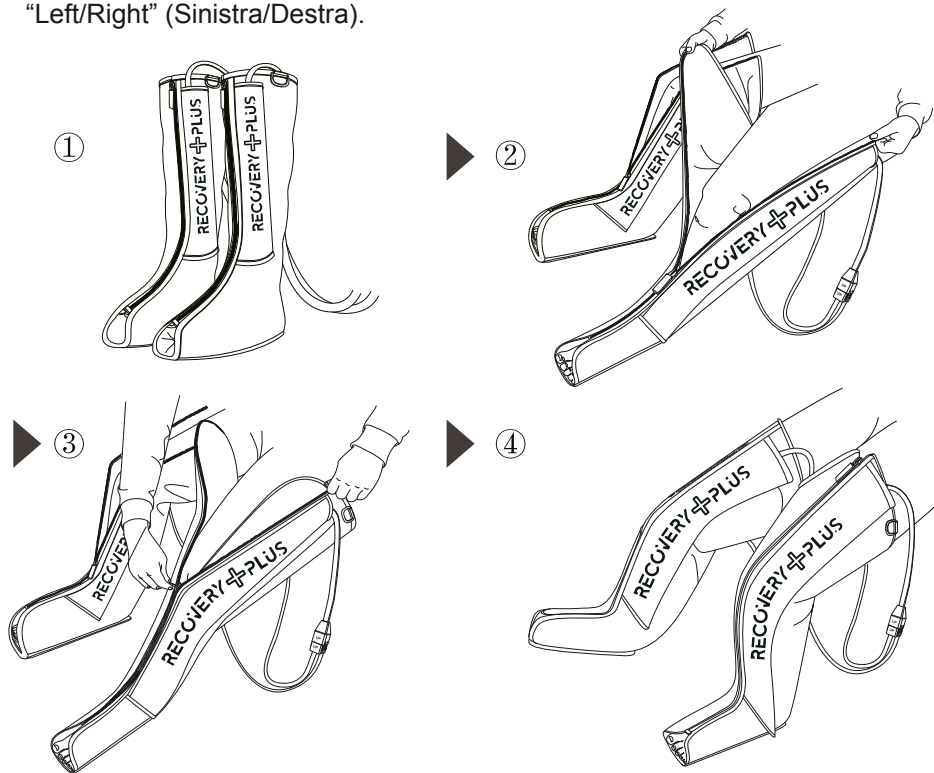

*Assicurarsi che la cerniera sia completamente chiusa prima di iniziare.
Non utilizzare mai il sistema con la cerniera aperta o parzialmente chiusa.

**Potete usare l'anello a D sulla parte superiore dello stivale per aiutarvi a indossarlo più rapidamente.

5· Trovare una posizione comoda seduti, sdraiati o reclinati.
Premere il pulsante ON/OFF per iniziare.


- a) Sentirete un “Di” e lo schermo si accenderà mostrando la configurazione iniziale
- b) L'impostazione predefinita è: Modalità 1 (Relax), intensità minima, durata 15 minuti.



6· Premere il pulsante MODE per cambiare modalità di massaggio.
Ci sono 4 modalità disponibili (vedi FAQ, D2 per i dettagli).



7· Premere il pulsante PRESSURE per regolare l'intensità della pressione dell'aria. Sono disponibili otto livelli. Si consiglia di iniziare con un livello basso e aumentarlo gradualmente con l'uso.

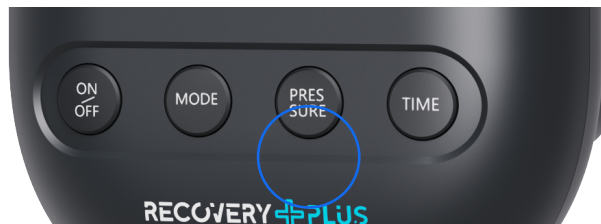


8· Premere il pulsante TIME per scegliere la durata della sessione: 20, 25 o 30 minuti. Il tempo può essere modificato anche durante il trattamento.



Il dispositivo si spegnerà automaticamente al termine della sessione. È possibile premere nuovamente il pulsante per avviare un'altra sessione per terminare il massaggio in anticipo.

NOTE DOPO L'USO

- 1· Dopo aver utilizzato il dispositivo, spegnere la centralina premendo il pulsante di accensione e scollegare l'adattatore dalla centralina e dalla presa.
- 2· Scollegare il tubo dalla centralina premendo il pulsante sulla sua parte superiore e tirando delicatamente.
- 3· Scollegare gli stivali dal condotto e rimuoverli dalle gambe.
- 4· Riporre il materiale nella confezione originale o nella borsa da trasporto.

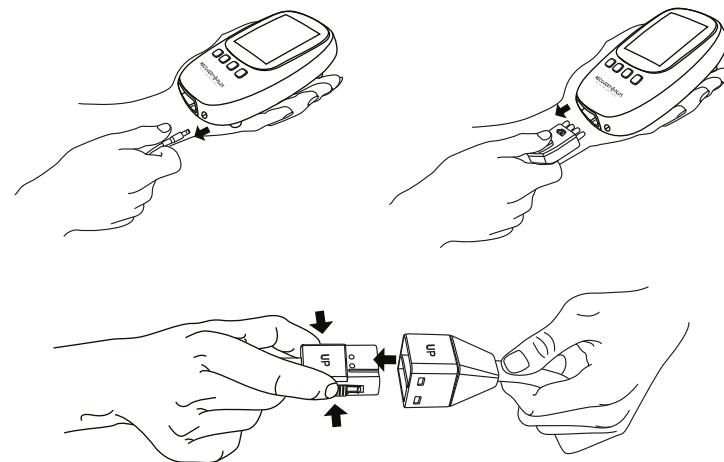

PULIZIA

- 1· In caso di sporco, pulire la centralina, gli stivali e i condotti con un panno pulito e umido.
- 2· Asciugare completamente con un panno asciutto.
- 3· Non utilizzare benzina, alcol, diluenti o altri liquidi aggressivi: potrebbero causare malfunzionamenti, scolorimento o danni ai componenti.
- 4· Non permettere l'ingresso di corpi estranei nei condotti.
- 5· Non lavare a secco.

STOCCAGGIO E MANUTENZIONE

- 1· Non tentare di smontare il prodotto. Non contiene parti riparabili dall'utente. In caso di problemi, contattare il servizio clienti: info@recovery-plus.es
- 2· Tenere fuori dalla portata di bambini o persone che non possono usarlo autonomamente.
- 3· Non collocare il dispositivo in luoghi con alte temperature o umidità.
- 4· Evitare l'esposizione diretta alla luce solare.

- 5· Evitare che aghi o oggetti appuntiti danneggino gli stivali o i condotti.
 - 6· Non appoggiare oggetti pesanti sul dispositivo.
 - 7· Mantenere puliti i connettori della centralina, i tubi e il caricatore.
 - 8· Non permettere l'accumulo di polvere o lanugine.
- Pulire il dispositivo con un panno asciutto prima dell'uso.

SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Smaltire secondo le normative locali sui rifiuti elettronici.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 2x stivali da massaggio (con tubi inclusi)
- 1x centralina di controllo
- 1x condotto dell'aria
- 1x adattatore AC100-240V, 50/60Hz, DC 12V 2A
- 1x manuale d'istruzioni
- 1x borsa da trasporto



GRAZIE

Grazie per aver scelto Recovery Plus e benvenuto nella famiglia R+.

Per maggiori informazioni visita: www.recovery-plus.es/support
Per qualsiasi domanda, il nostro servizio clienti è disponibile 24/7:

INFO@RECOVERY-PLUS.ES

+34 649 932 249

GO TO THE
NEXT
LEVEL

WWW.RECOVERY-PLUS.ES